

Kiromed Praktik (XJ-I seria) Gravitációs gerincnyújtó pad Összeszerelési útmutató



A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk.








Figyelem:

- A saját biztonsága érdekében az összeszereléshez két felnőtt szükséges!
- Szigorúan tilos átalakításokat végezni a gépen!
- Komoly baleseteket okozhat bármely alkatrész eltávolítása, vagy átalakítása!
- Az összerakásnál óvatosan használja a szerszámokat!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van-e összeszerelve!
- Összeszerelés után gondosan ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e rögzítve, nem túl laza, vagy nem túl szoros!
- A gép meghibásodása esetén tilos a használat, mert sérülést okozhat!

ALKATRÉSZLISTA

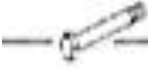Oldal	Megnevezés	Menny.	Oldal	Megnevezés	Menny.
1	Elülső U-keret	1	26	Alsó ágykeret csapágyperselye	2
2	Hátsó U-keret	1	27	Csavaralátét (M6)	16
3	Magasságállító cső	1	28	Felső ágykeret csapágyperselye	1
4	Ágykeret	1	29	Fogantyú	2
5	Forgató kar	2	30	Gomb	1
6	Állítható lábtartó keret	1	31	Saroktartó	4
7	Bokarögzítő	4	32	Heveder	1
8	Összecsukó kar	2	33	Rögzítő pánt	1
9	Rúd	1	34	Pántrögzítő	1
10	Hatszögfejű csavar	2	35	Háttámla	1
11	Hatszögfejű csavar	2	36	Habszivacs fogantyú	1
12	Philips csavar (6x32)	4	37	Védőborítás	1
13	Csavaralátét	16	38	Hatszög csavar (8x22)	2
14	Kerek alátét	1	39	Lábtartó	2
15	Rögzítő ék (M8)	8	40	Hatszög csavar (8x50)	2
16	Rögzítő ék (M6)	6	41	Négyszögletű lezáró	2
17	Kis rugós gomb	1	42	Rugós zár	1
18	Nagy rugós gomb	1	43	Hatszög csavar (8x38)	2
19	Biztonsági horog	2	44	Magassági skála	1
20	Gumis lemez	1	45	Műanyag csapágy.	1
21	Lezáró sapka	2	46	Lemez	1
22	Lábtartó lezáró sapka	2	47	Kétoldalas ragasztó	1
23	Rugó	1	48	Csavar M6x20	4
24	Négyszögletű véglezáró	1	49	Lezáró a jobb o. láb	2
25	Kerek véglezáró	4	50	Lezáró a bal o. láb	2
			51	Csavar M6x25	4

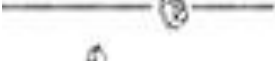ESZKÖZCSOMAG

Alkatrész	Megnevezés		Mennyiség
11	Hatszögfejű csavar M6x47		2
13	Csavaralátét M8		12
15	Anyacsavar M8		6
16	Anyacsavar M8		2
38	Hatszögfejű csavar M8x22		2
40	Hatszögfejű csavar M8x50		2
43	Hatszögfejű csavar M8x38		2



Villáskulcs M11x14 (2 db)

TALPAKAT TARTALMAZÓ CSOMAG


Alkatrész száma	Megnevezés	Mennyiség
27	M6 csavaralátét	8
48	Csavar M6x20	4
49	Jobb o. talp	2
50	Bal o. talp	2
51	Csavar M6x25	4

FIGYELEM

A készülék összeszereléséhez szükséges valamennyi alkatrészt bemutattuk a fenti táblázatban. Mielőtt elkezdené összeszerelni a készüléket, a lista alapján győződjön meg a csomag hiánytalanságáról!

ÖSSZESZERELÉS


Tegye az alkatrészeket egy üres padlófelületre és távolítsa el a csomagolóanyagokat! Az alkatrészlista segítségével azonosítsa be az egyes elemeket! Ezt követően az alábbi lépések szerint szerelje össze a készüléket!

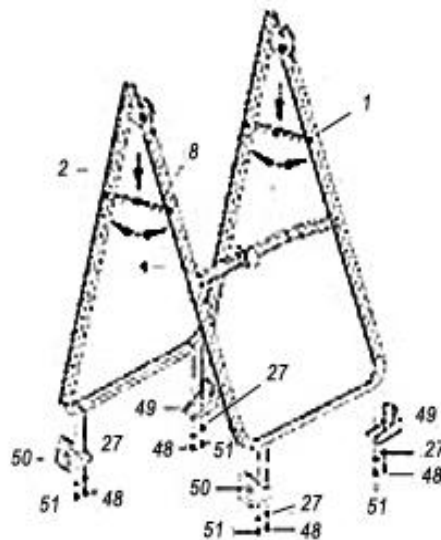

1. lépés


Az U-kereteket szétnyitva állítsa fel a készülék alapszerkezeteként, ahogy a fenti ábra mutatja! Teljesen távolítsa el egymástól az elülső és hátsó U-kereteket, majd nyomja le a két csuklós kart (8), hogy azok rögzüljenek!

Két-két csavarral (48, 51) és csavaralátéttel (27) tegye fel a bal és jobb talpat (50, 49) az első és a hátsó U-keretre (1, 2)! Egyes típusoknál a talpakat felszerelve szállítják.

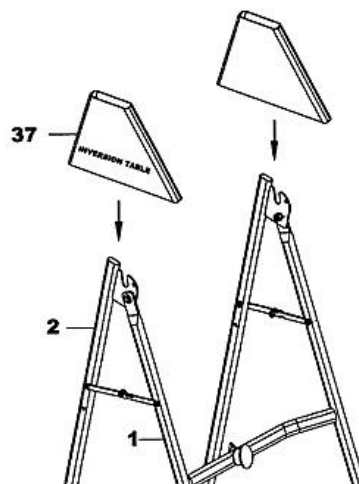


2. lépés

Csúsztassa a védőborításokat (37) a váz két oldalára az ábra szerint; addig nyomja le a borítást, amíg annak alsó pereme el nem fedi a csuklós karokat! A borítás alján található tépőzáras pántokkal rögzítse a borítást a csuklós karokhoz! A borítás akkor van megfelelően feltéve, ha az teljesen eltakarja a csuklós karokat és a logo oldalt látszik.

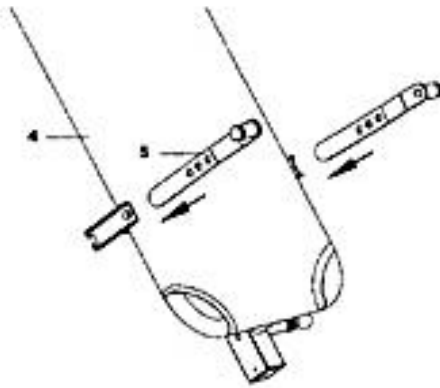


3. lépés

Csúsztassa a forgató karokat (5) az ágykeret (4) két oldalán található sínekre! Illessze a kívánt lyukat a sínen lévő furathoz! Javasoljuk, hogy mindaddig az alsó lyukat használja, amíg biztonságosnak nem érzi a készülék használatát.

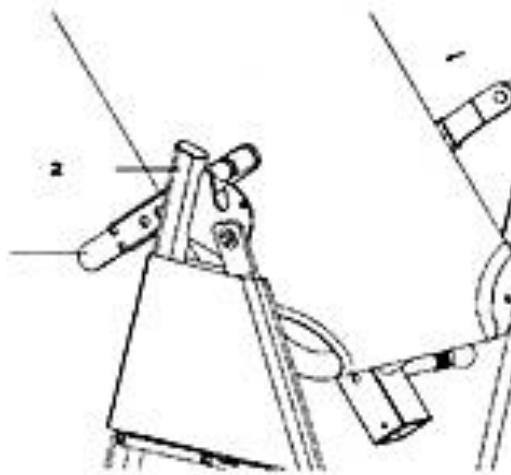

4. lépés

A fekvőfelület U-keretre történő rögzítése érdekében illessze a forgató karok végén lévő bemart részt a lemezen található vágatba!

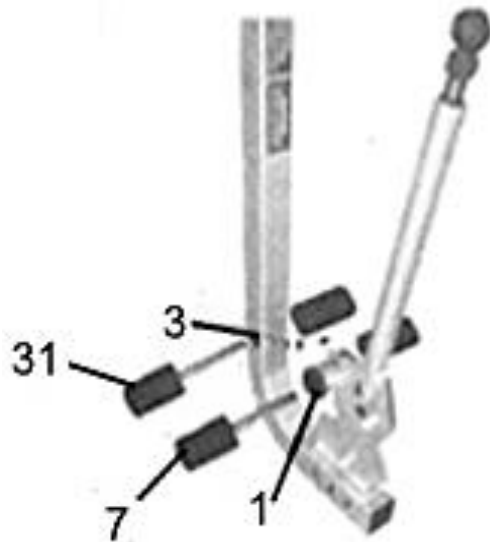


Ezt követően illessze a bokarögzítőt (7) és a saroktartót (31) a rúd végére! Az ábra szerint csúsztassa át a rudat a magasságállító csövön lévő kerek lyukon (3), ill. a rögzítőkaron található furaton (1), majd a rúd másik végére szerelje fel a másik bokarögzítőt és a saroktartót!




5. lépés

Csúsztassa a lábtartót a magasságállító rúdba és illessze egymáshoz a rúdon és a lábtartón található 2-2 lyukat! Hatszögfejű csavar, önzáró anya és egy csavaralátét segítségével rögzítse a lábtartót!

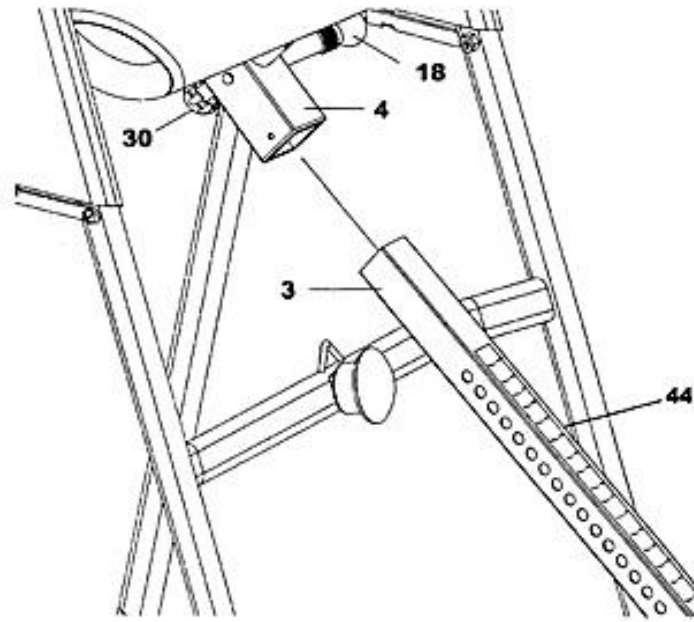


6. lépés

Húzza ki a nagy rugós gombot (18) és csúsztassa a magasságállító csövet (3) a fekvőfelület alján található négyszögcsőbe (4)! Tolja felfelé a kívánt magasságig a csövet, és úgy állítsa be, hogy a magassági skála (44) megfelelő pontja a négyszögcső alatt legyen! Engedje el a gombot és úgy igazítsa a csövet, hogy a pecék rögzüljön a megfelelő furatban! A fokozott biztonság érdekében szorítsa rá a gombot (30) az ágykereten a négyszögcső hátára! Lásd az ábrát!

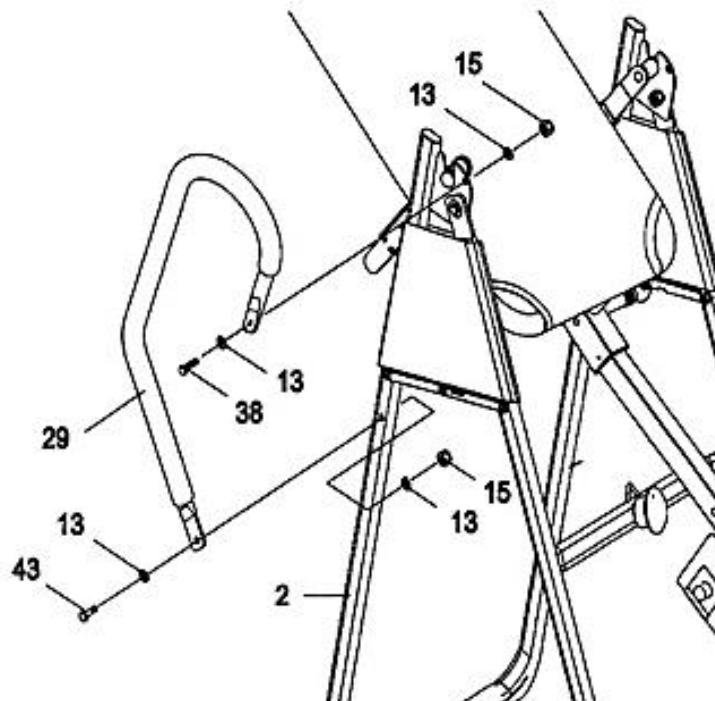


A fenti ábra szerint szerelje fel a kapaszkodót (29) a hátsó U-keretre (2)! Használja a hatszögfejú csavarokat, csavartalátéteket és az önzáró anyát!

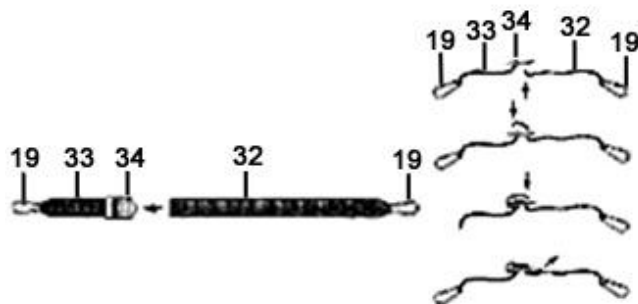

7. lépés

Fűzze át a nylon hevedert (32) a hevedercsaton (34), vezesse végig az előre rácsatolt heveder (33) fölött és húzza le a pánt végén a csat másik felén! Ezt követően hajtsa vissza a hevedert a csat fölé és húzza át az első lyukon, majd szorítsa meg a hevedert! Lásd az ábrát!

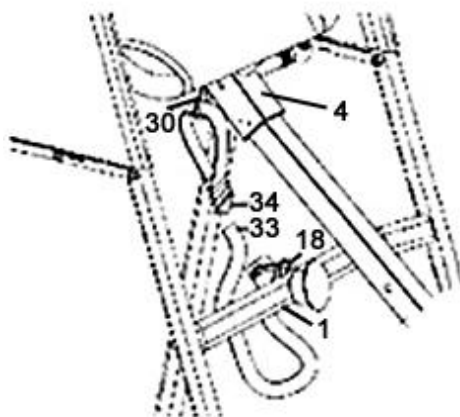

8. lépés

Csatlakoztassa a hevedert a gravitációs padhoz! Ehhez az ábra szerint csatolja a karabinert az ágykeret hátoldalára előre szerelt fülbe (4)! Ezt követően csatolja a heveder másik végét (33) az U-keret elején lévő fülbe (1)! Lásd az ábrát!